TROFEO
Ruthinium®

PROTOCOLLO FOTOGRAFICO

Protocollo Fotografico

Cari partecipanti, Docenti Coordinatori ed Istituti aderenti alla 7° Edizione del Trofeo Ruthinium,
Vi inviamo questo protocollo per supportarvi nella preparazione dei lavori.

Per qualsiasi ulteriore informazione necessaria o necessità di supporto tecnico, vi preghiamo di contattare direttamente il nostro tecnico responsabile:

MATTIA FURLANETTO mattia.furlanetto@ruthinium.it

Il Team Ruthinium

TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 1

Modello master superiore ed inferiore con la centrica in silicone dove è presente la linea mediana ed il piano occlusale.




TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 2

Modello inferiore inserito nella centrica in silicone.

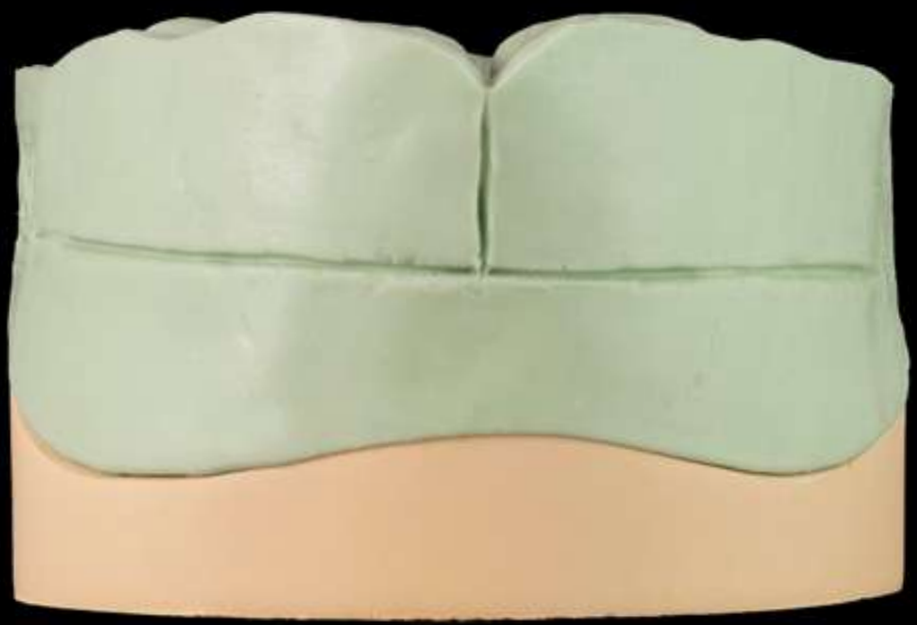





TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 3

Modello superiore inserito nella centrica in silicone.

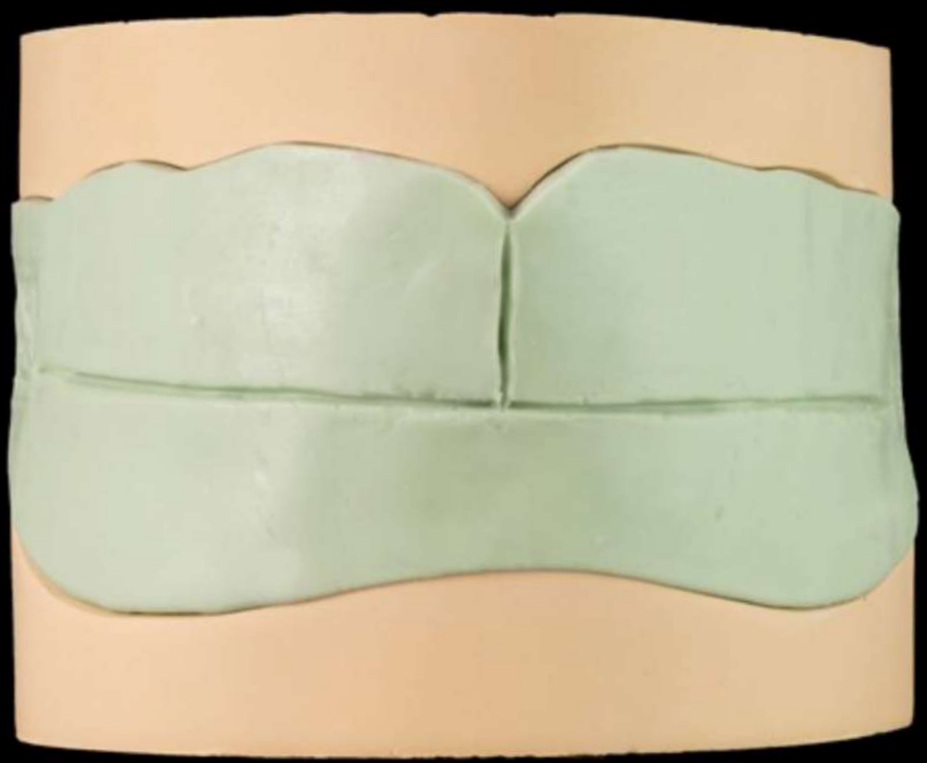

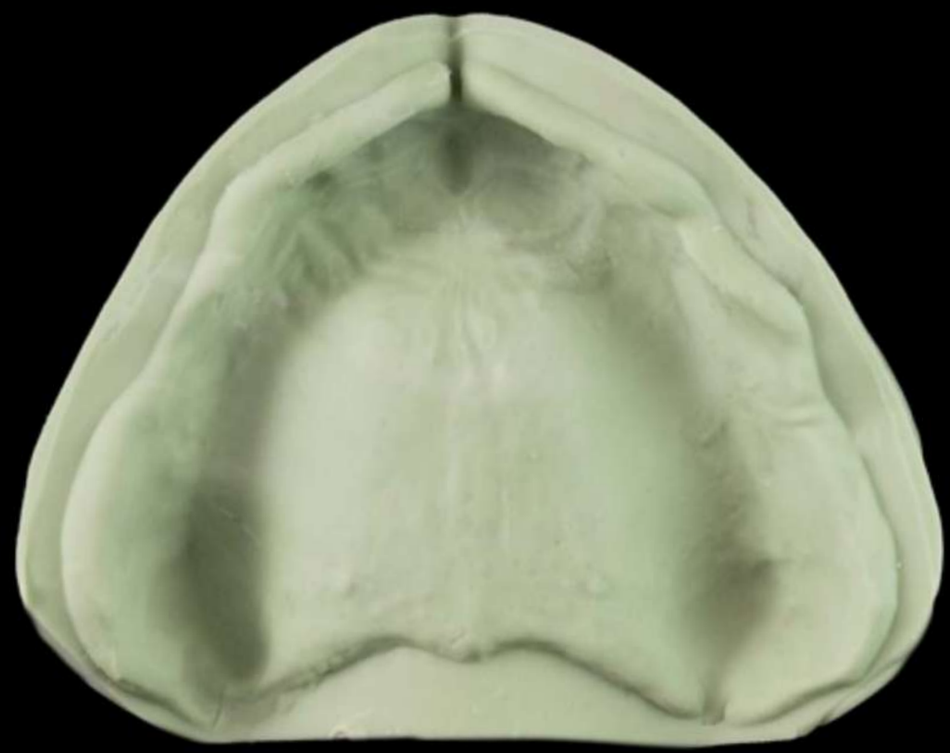



TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 4

Posizionare il modello inferiore in articolatore (articolatore a valori medi ASA o altri) con la centrica inserita facendo corrispondere il piano occlusale su un piano ideale.

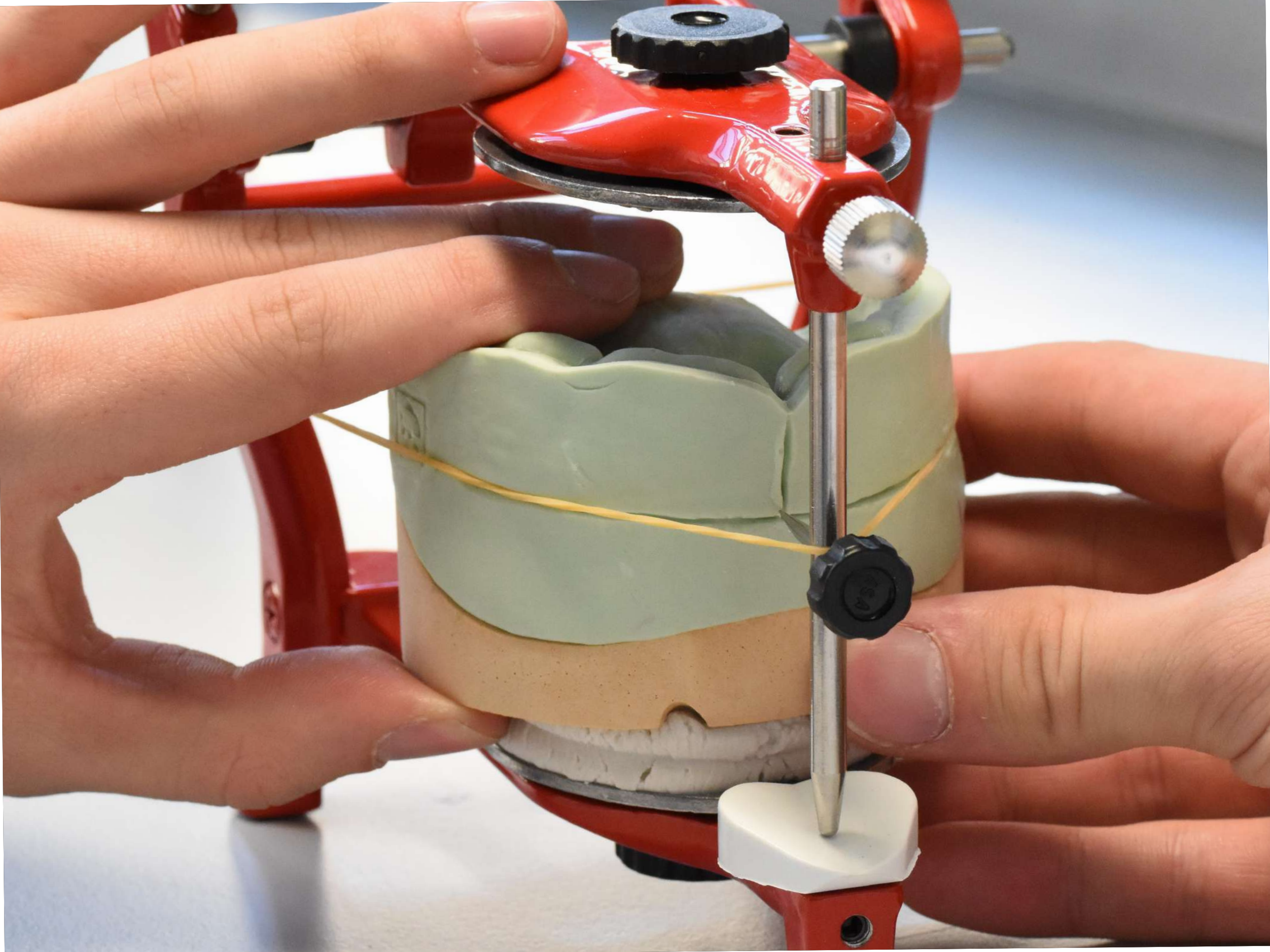

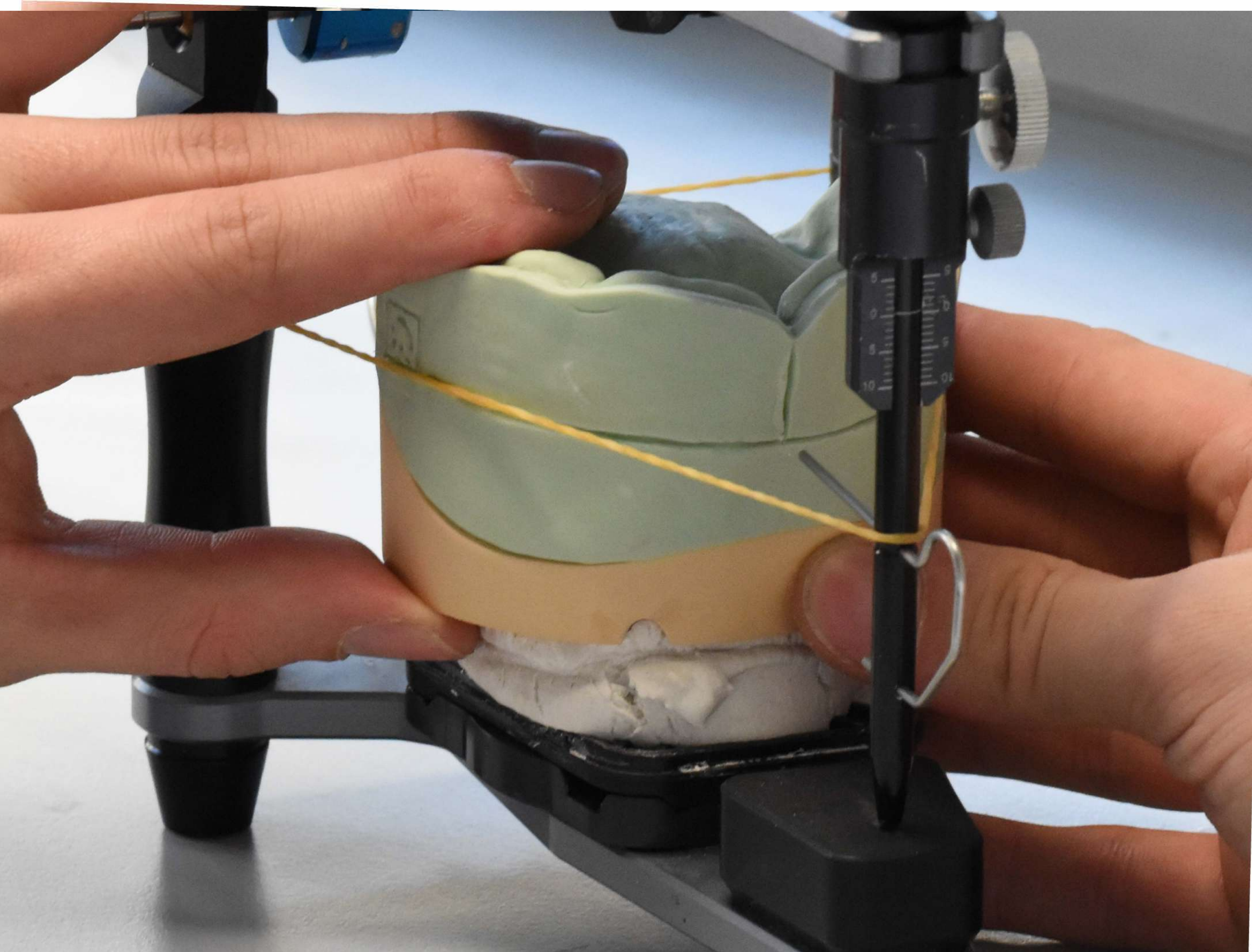

TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 5

Completare il fissaggio dei modelli in articolatore
con il modello superiore.





TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 6

Completare l’articolare.








TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 7


Procedere con la costruzione delle placche stabilizzate in resina.

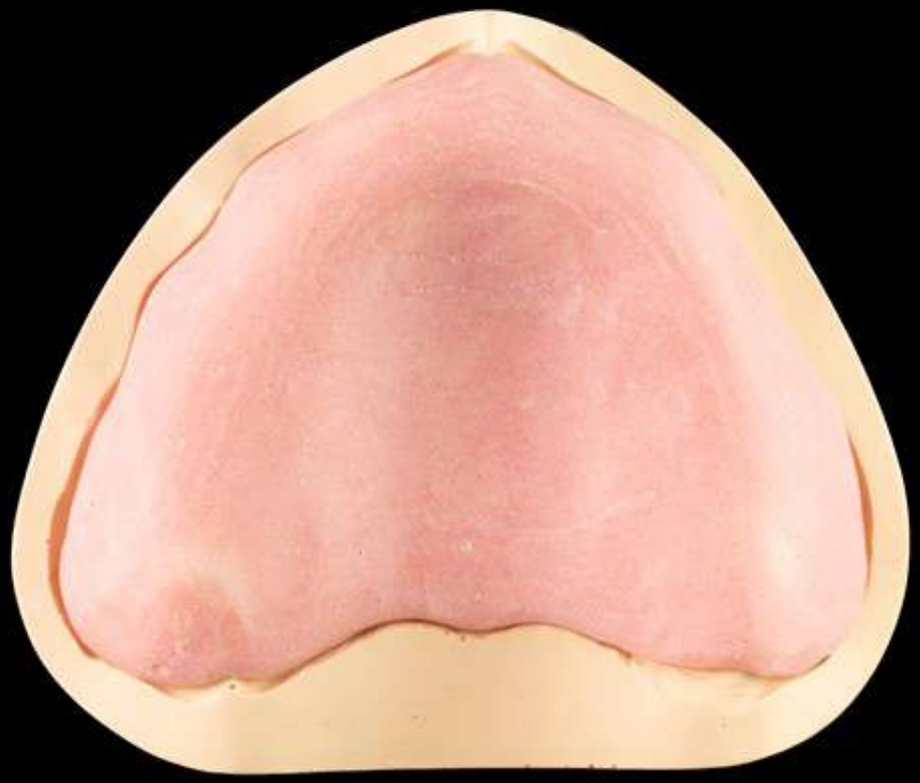



STEP 8

Per stabilire l’altezza del vallo in cera una volta posizionato sulla placca in resina secondo le regole della protesi mobile, segnare con una matita dei punti su i modelli.

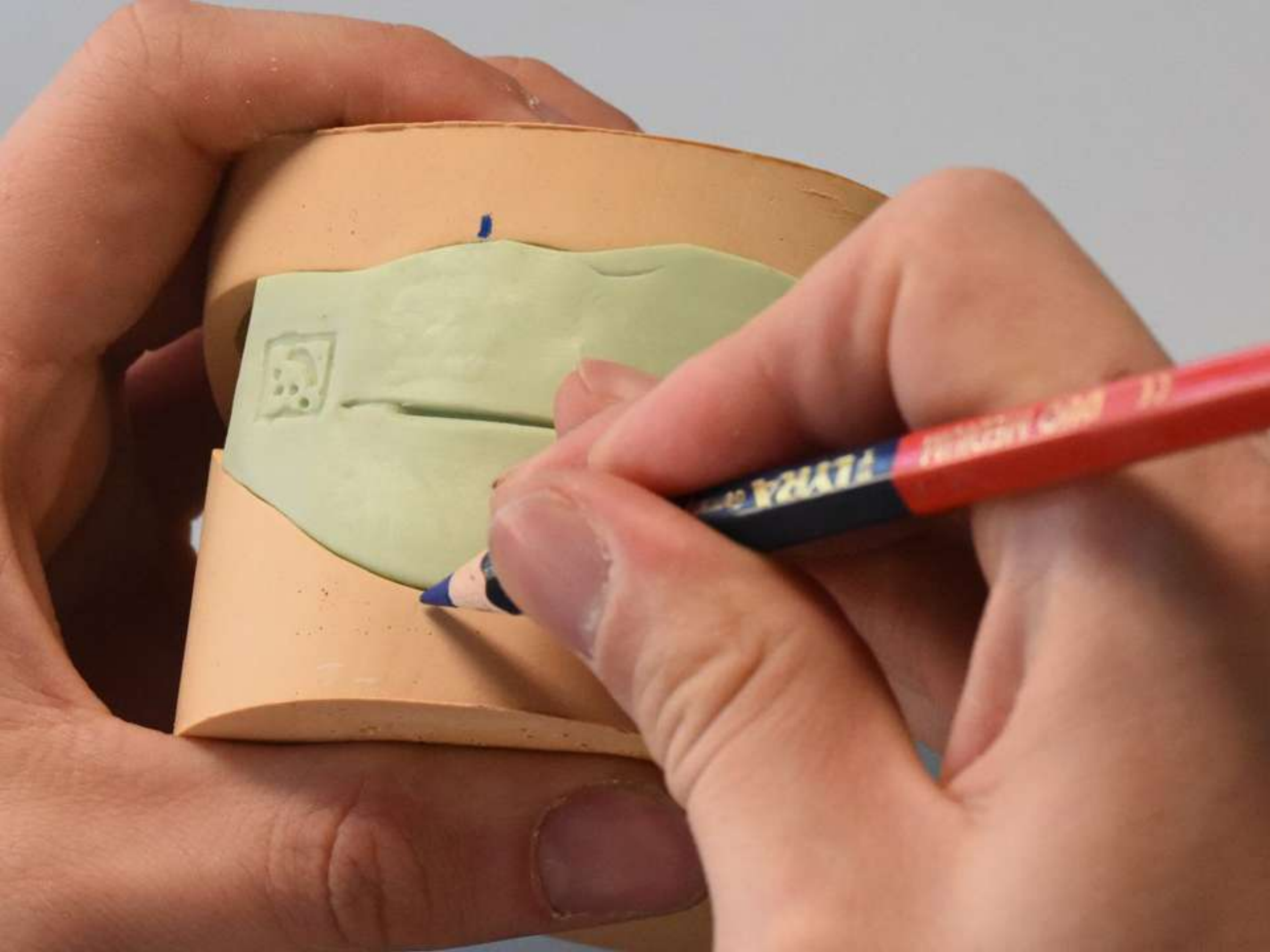



TROFEO Ruthinium


Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 9


Con un calibro prendere la misura dal punto sul modello al piano occlusale sulla centrica in silicone e far corrispondere il vallo alla stessa altezza.

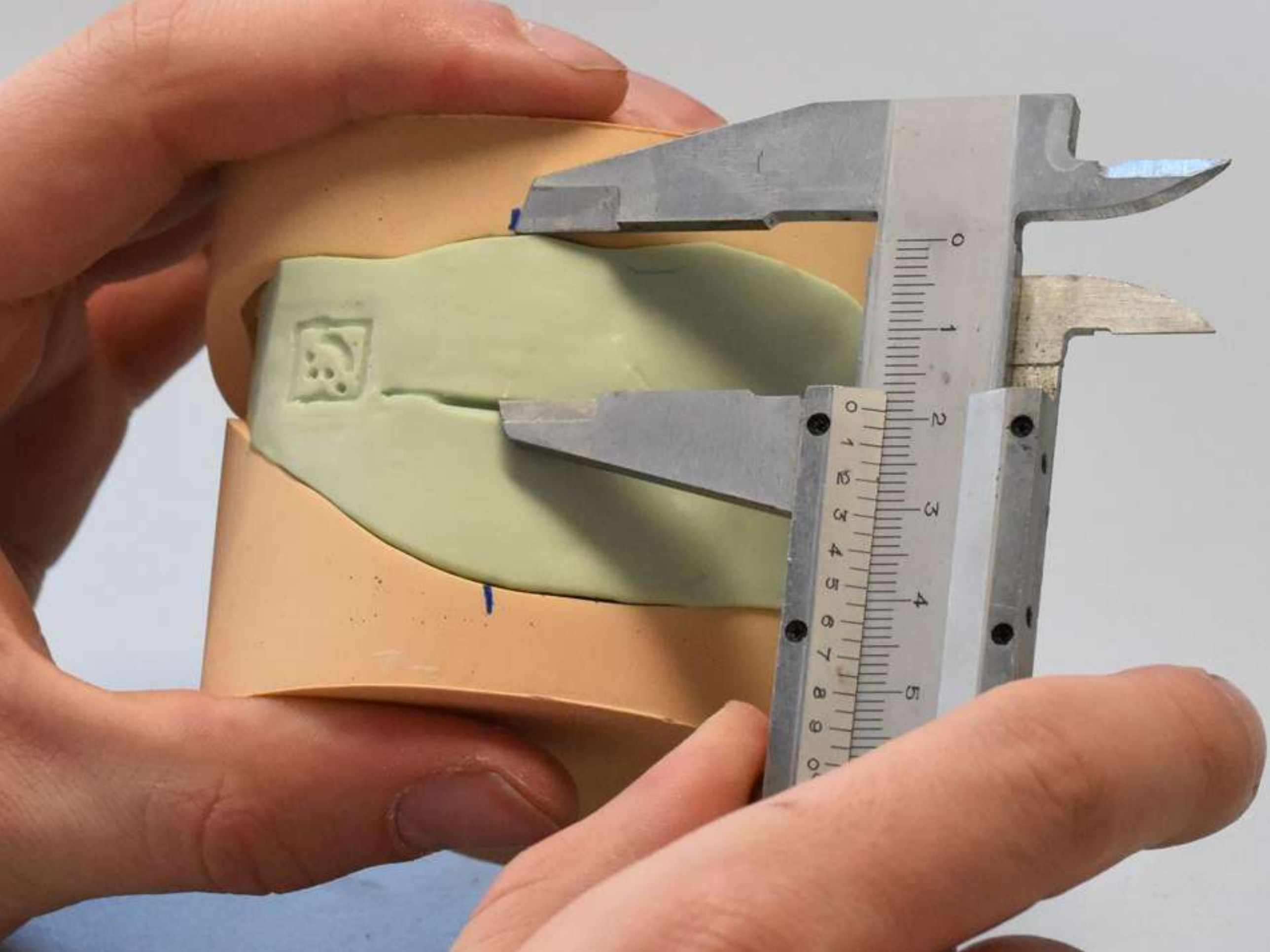

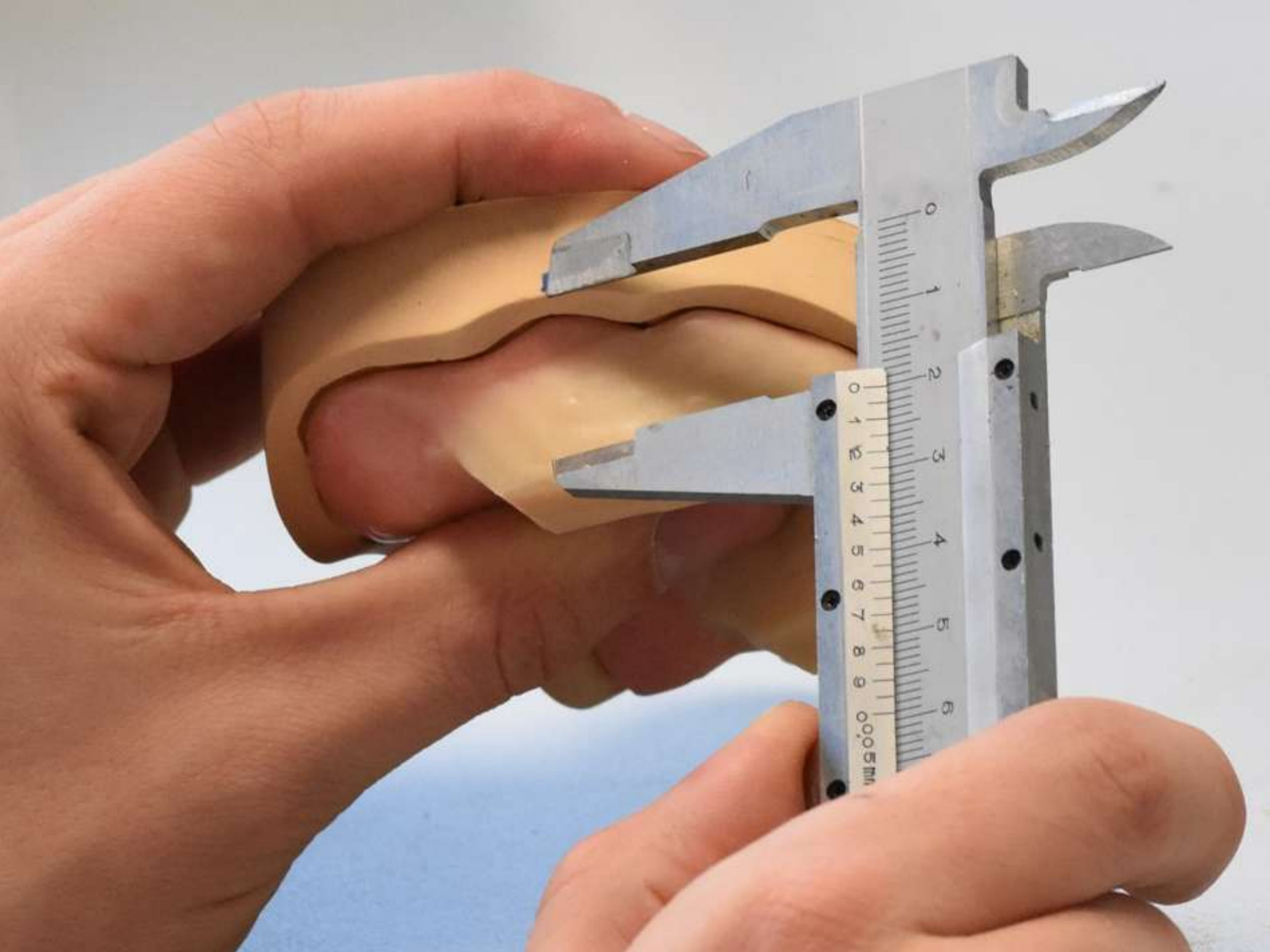

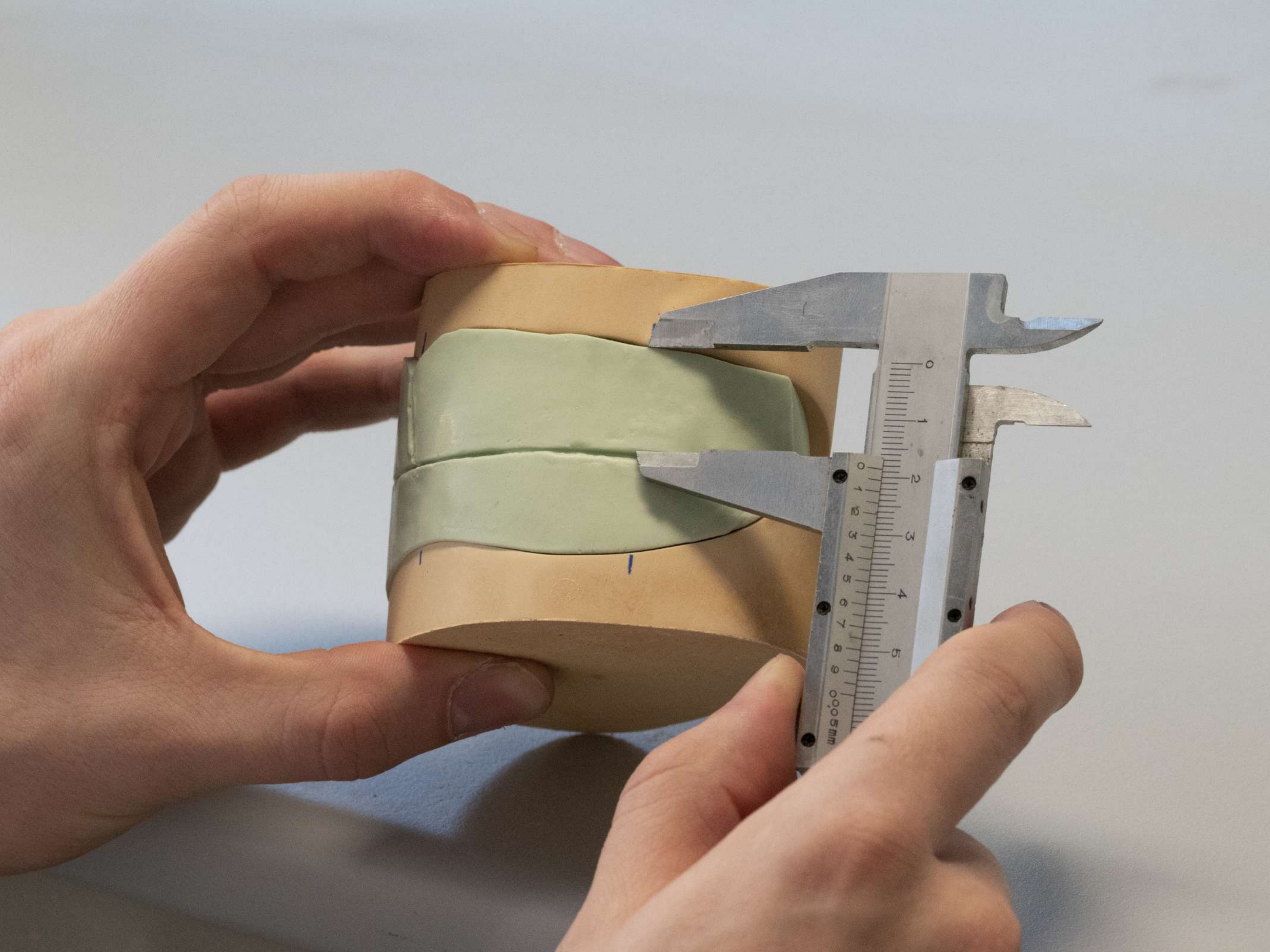
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0,005mm



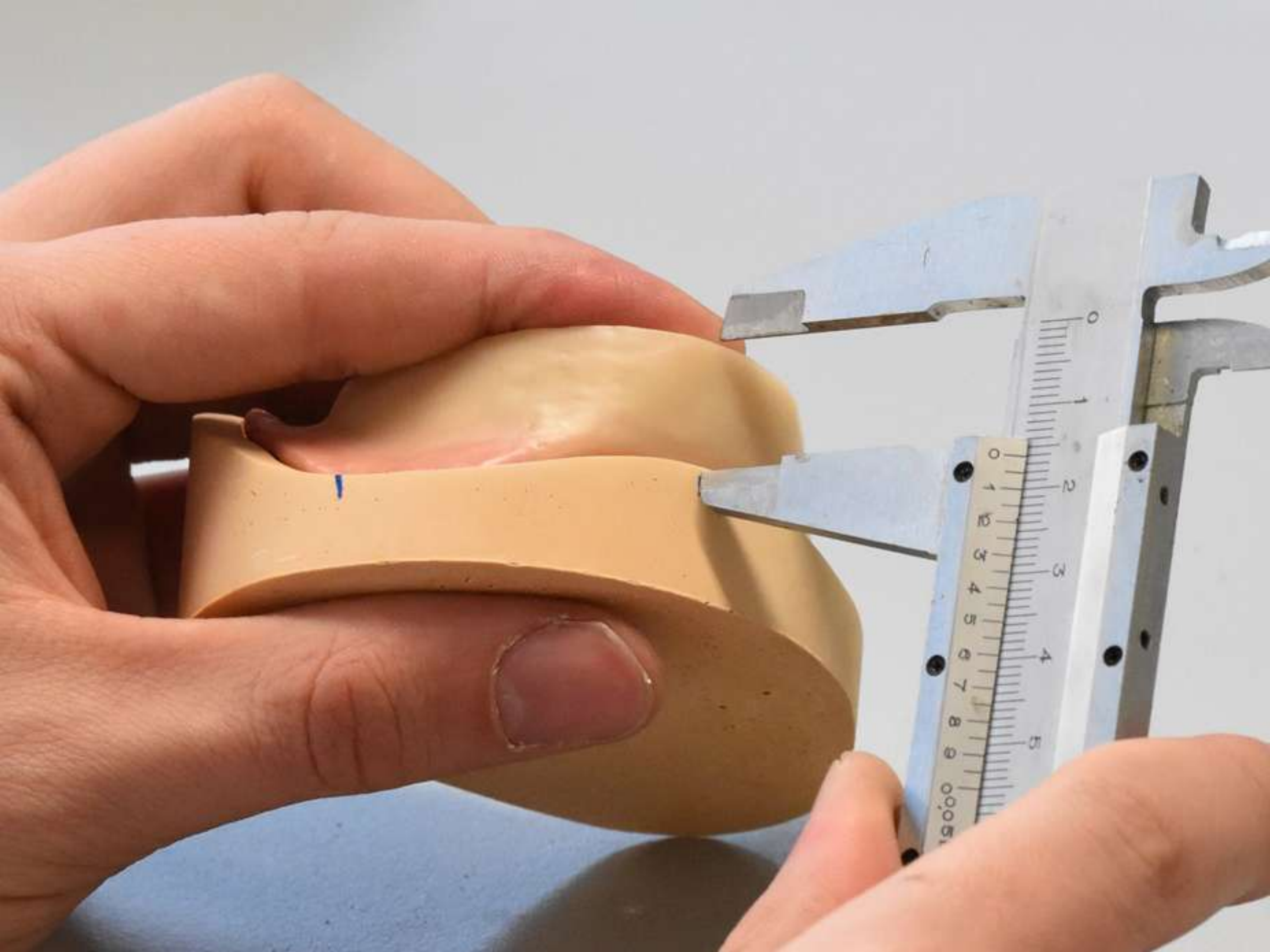


TROFEO Ruthinium®

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 10

Ultimare i valli.

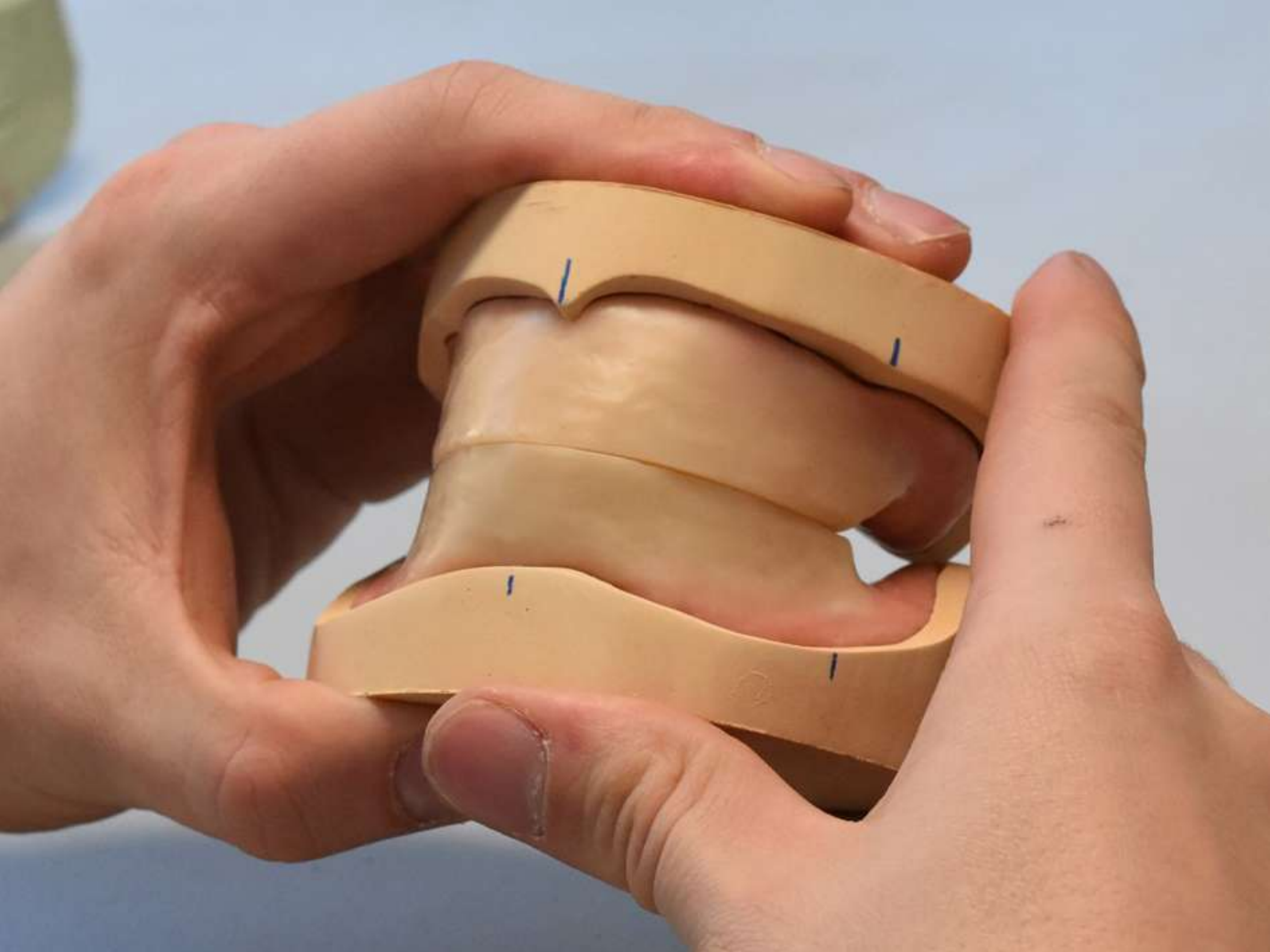

STEP 11

Segnare la linea mediana.




TROFEO Ruthinium

Ruthinium®
WE TAKE CARE OF YOUR SMILE

STEP 12

Posizionati i valli su i modelli in articolatore,
procedere con il montaggio.

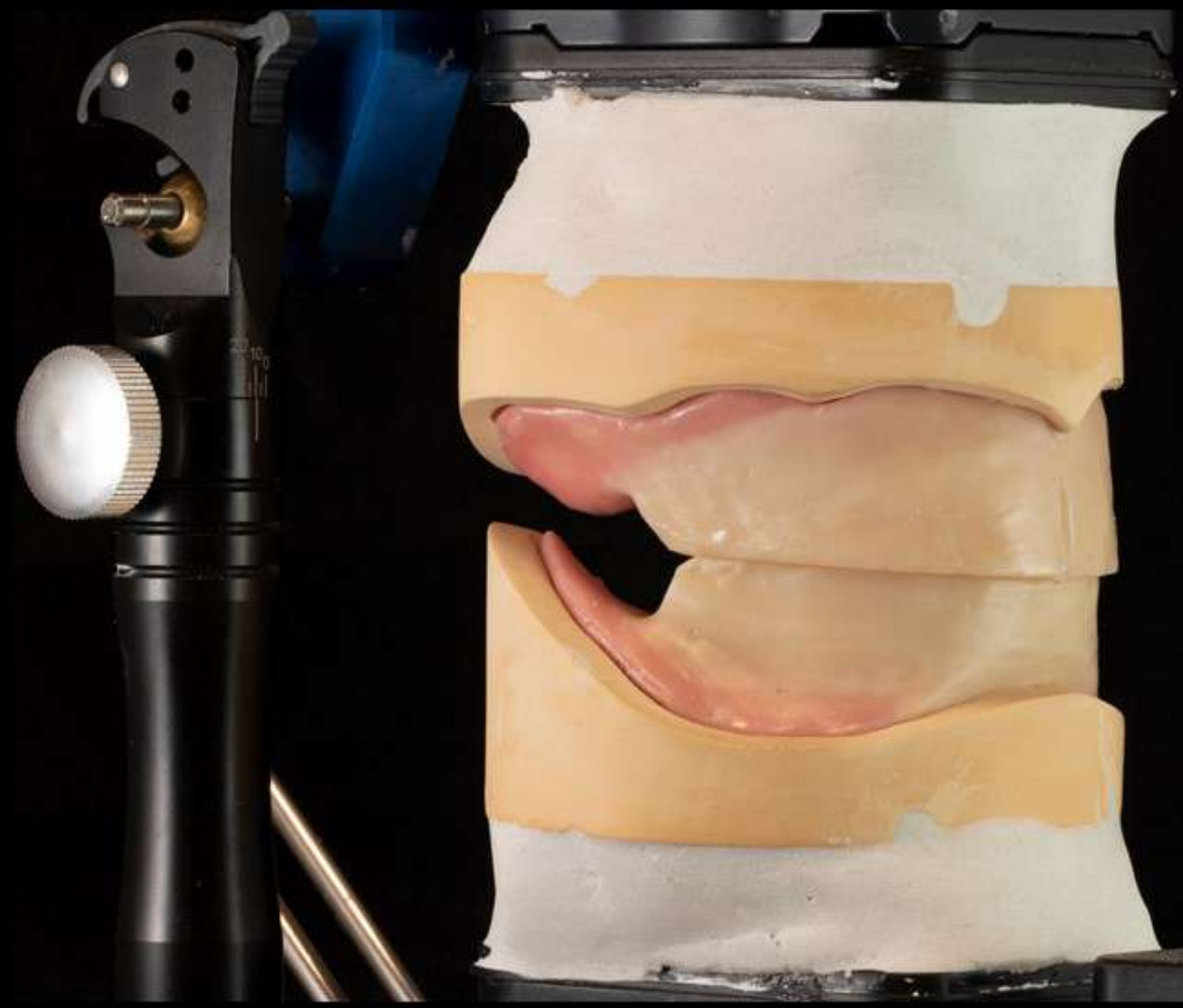



Per ogni ulteriore informazione:

INFORMAZIONI TECNICHE SUL PROTOCOLLO

MATTIA FURLANETTO

mattia.furlanetto@ruthinium.it

SEGRETERIA SCADENZE E REGISTRAZIONI

ELENA SACCHI

elena.sacchi@ruthinium.it

RESPONSABILE ISTITUZIONALE PROGETTI SCUOLE

BARBARA PIAZZA

barbara.piazza@ruthinium.it